



Hémiscaphandres

Sécurisez vos préparations et productions
en offrant la **souplesse de manipulation**





HEAUME INTERCHANGEABLE



HEAUME SOUDÉ

Les performances des hémiscaphandres PIERCANTECH

L'hémiscaphandre est l'extension du concept gant-manchette appliqué au haut du corps. Ce système offre une grande zone de fonctionnement qui permet à l'utilisateur d'avoir une maîtrise de ses mouvements en assurant le confinement de votre environnement de production.

Les domaines d'application



VÉTÉINAIRE



SANTÉ - HOSPITALIER



SANTÉ - PHARMACEUTIQUE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Ils utilisent des hémiscaphandres PiercanTech



Hospices Civils de Lyon



Hôpital européen Georges-Pompidou



Produits compatibles aux spécifications du secteur santé-pharmaceutique



SANOFI PASTEUR



Hémiscaphandres : les options disponibles

Matériaux

TISSU ENDUIT LOURD

TISSU ENDUIT LEGER

PVC CALANDRÉ

PVC CRISTAL

HEAUME INTERCHANGEABLE

La **visière*** en **PVC pressé/cristal** assure une bonne qualité optique avec un champ de vision à 360°, usage prolongé de l'hémiscaphandre.




OPTIONS

- Deux tailles (grand et petit), possibilité de sur-mesure
- Tissu simple ou tissu doublé en PVC
- Différents coloris

HEAUME SOUDÉ

Deux visières* recto/verso (pour isolateur de production) en **PVC pressé/cristal** assure une bonne qualité optique avec un champ de vision à 180°.

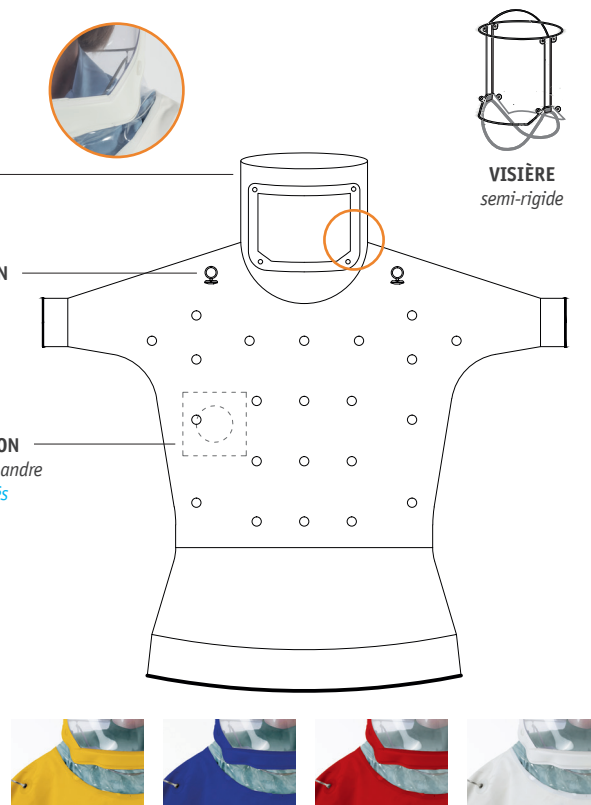

OPTIONS


- Deux tailles (grand et petit), possibilité de sur-mesure
- Tissu simple ou tissu doublé en PVC
- Différents coloris

Accessoires pour hémiscaphandre : les options disponibles

PIERCANTECH propose de multi-accessoires pour l'hémiscaphandre. On distingue trois éléments parmi les accessoires comme le **connecteur de ventilateur**, le **ronde de poignet** et **le gant**. Assemblé grâce à la **bague de connexion** le rond de poignet et le gant simplifient et sécurisent les opérations de manipulations.



RONDE DE TÊTE
pour heaume interchangeable

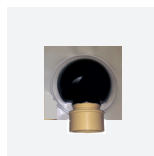

CONNECTEUR de VENTILATEUR



RONDE DE POIGNET et JOINTS



GANTS


NOS POINTS FORTS

- + Grande souplesse dans les usages et les manipulations
- + Barrière efficace contre les agents polluants et contaminants
- + Protection des opérateurs, sécurité des préparations et des installations
- + Compatible avec les agents de nettoyage et de décontamination de surface

De l'étude à la pièce réalisée **des hémiscaphandres**

À partir de l'expression de vos besoins, PiercanTech vous apporte la bonne solution, via un processus maîtrisé – étude, fabrication, contrôle – où le respect de la qualité fait l'objet de toute notre vigilance.

LES ÉTUDES

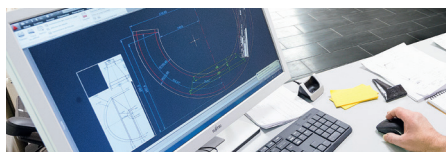

• Bureau d'études

Il analyse vos demandes et vous accompagne dans la recherche de la solution la plus adaptée. Choix du matériau, mise au point du produit, prototypage.

• Optimisation économique

L'étude de solutions adaptées à vos besoins intègre à la fois les facteurs qualité, délais et coûts de production, facilitant ainsi l'optimisation économique de votre projet.

LA FABRICATION



• La coupe

Les ciseaux à lames circulaires et à lames vibrantes sont utilisés. La coupe en bout semi-automatique : découpe unitaire au patron ou au format des matelas ou au gabarit.

• La soudure

Confection par soudure haute fréquence qui garantit une parfaite étanchéité des assemblages. Parc de soudeuses puissant adapté aux articles de confinement.

• Les propriétés

Compatibles avec les agents de nettoyage, de décontamination et de désinfection.

LE CONTRÔLE EN TROIS ÉTAPES



1 • Contrôle en amont des matières premières et des outillages avec vérification des dimensions sur plan via notre logiciel de gestion de production.

2 • Contrôle durant la production des paramètres physico-chimiques par le laboratoire de contrôle qualité et des paramètres de production par les opérateurs.

3 • Contrôle du produit fini

• Contrôle étanchéité

• Contrôle des soudures


• Marquage permettant l'identification de la pièce contrôlée pour une totale traçabilité.

PIERCANTECH à travers le monde



Piercan USA • Usine
San Diego

USA

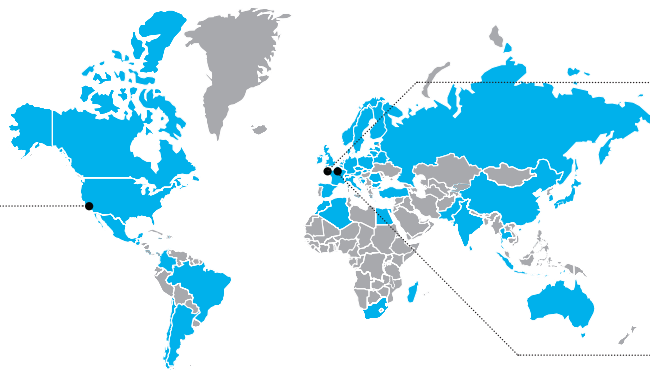

Siège social Piercan • Usine
Port-en-Bessin

France



Direction commerciale Piercan
• Usine Plastunion Bondy

France

La production Piercan est vendue dans 62 pays



UNE QUESTION, BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ?

N'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire un mail, Piercan est au service de vos projets...
Coordonnées de votre interlocuteur :

📞 Téléphone +33 (0)1 45 88 66 27

✉️ E-mail piercan@piercan.fr



PIERCAN FRANCE

17-23 rue Marcel Dassault
93140 Bondy - France
01 45 88 66 27 | F 01 48 49 87 64
piercan@piercan.fr | piercan.fr

PIERCAN USA

180 Bosstick Blvd
San Marcos, CA 92069 - USA
760-599-4543
sales@piercanusa.com | piercanusa.com

